


Maxi Move®



Maxi Moveは、患者様や入居者様の移乗や体位変換など、日常的な作業を一人の介助者が行えるように設計されています。さまざまなスプレッダーバーを使用して患者様の移乗ニーズに対応できる、幅広い用途を兼ねそろえたソリューションです。

ARJO モビリティ・ギャラリー

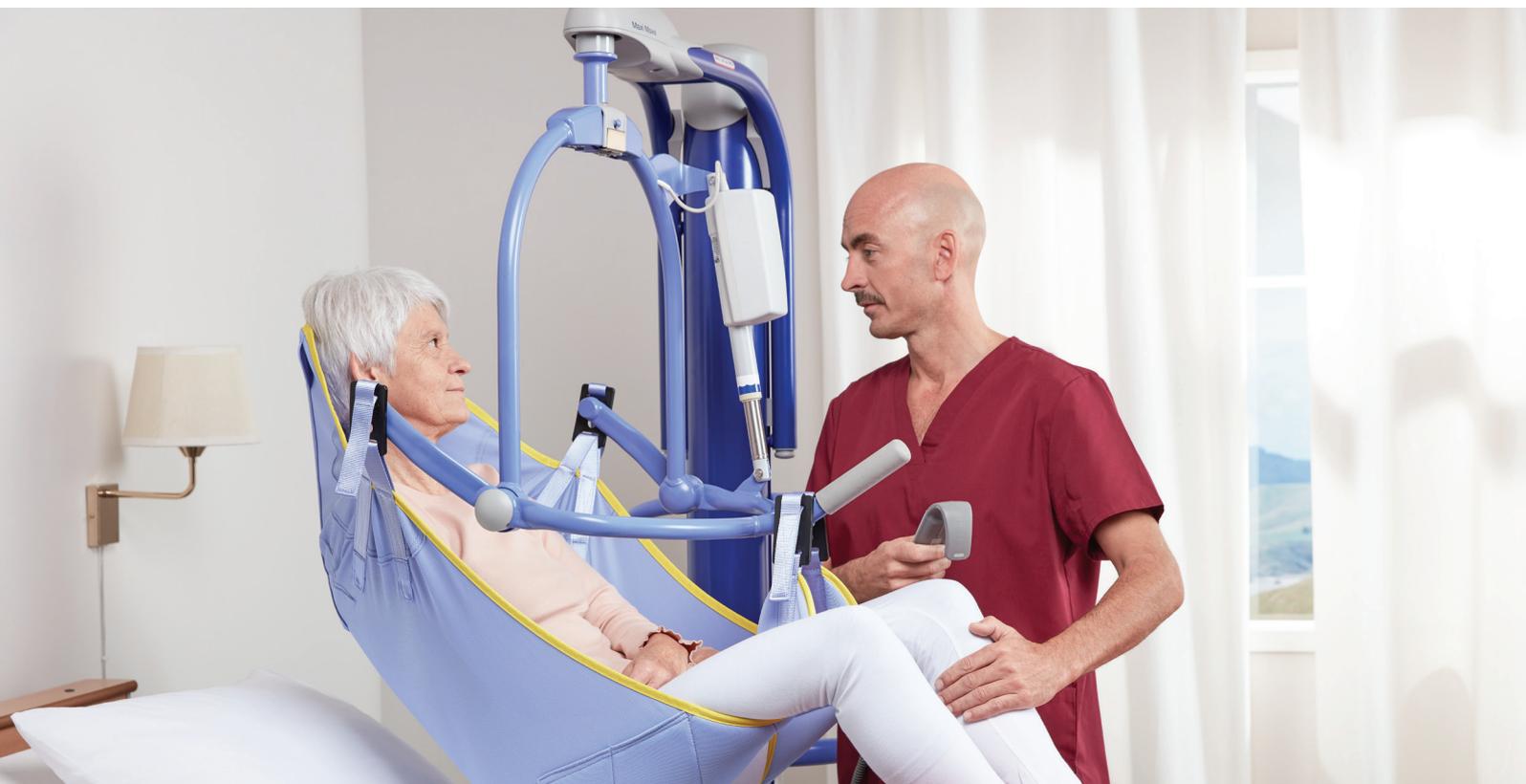

D



E

© Arjo 2019

D. 両足に体重をかけた立位をとれない。十分なサポートがあれば座位をとれる。

E. 座位を取り続けることは困難。常時、またはときどきベッドで横になっている。座位を保持する椅子が必要。

詳細は、Arjoにお問い合わせください。

- **安定した昇降**
安定した垂直昇降動作により、患者様は昇降や移乗の際に、マストから一定の距離を置いて安定した姿勢を保つことができます。
- **安全で快適な移乗**
スプレッダーバーと一体型の電動ダイナミックポジショニングシステム (PDPS) によって、患者様の位置決めをスリング上で行うことができ、マニュアル操作を最小限に抑えます。
- **幅広い用途**
取り外し可能なスプレッダーバー (オプション) は、介助者が様々なタイプのスリングを用途に応じて選択できるシステムです。
- **広い昇降範囲**
上下に伸縮するマストと延長ジブを組み合わせると、ベッドや床からの持ち上げに対応でき、広範囲の昇降が可能になります。
- **豊富なオプションから選べるフレキシブルなシステム**
体重計や、低床ソファやトロリーにも対応可能な超低床キャスターなどのオプションが用意されています。

主な特長

コンビアタッチメント

コンビアタッチメントを使うと、スプレッダーバーやストレッチャーフレームが簡単に付け替ええます。

POWERED DPS

電動ダイナミックポジショニングシステム (PDPS) は、マニュアル作業を最小限に抑え、患者様の確かな位置に移乗させます。

キャスターのサイズ

標準、低床、超低床の3種類があり、低いベッドやトrolleyにも対応できるキャスターです。



デュアルコントロール

マストとコントロール手元スイッチのデュアルコントロール。コントロール手元スイッチを使用すると、介助者は昇降や移乗中も患者様の近くで表情を確認しながら作業することができます。

体重計 (オプション)

一体型体重計 (オプション) で効率的に体重を測定できます。

伸縮式垂直マスト

垂直マストは、安定した状態で患者様の移乗操作が行えます。


製品情報

最大安全耐荷重	227 kg
延長ジブ使用時の最大安全耐荷重	130 kg
機器の総重量 (スプレッダーバーとバッテリーを含む)	70 kg
持ち上げ最高値	1575 mm
持ち上げ最小値	225 mm
持ち上げストローク長	1350 mm
保管時のサイズ (高さ)	1402 mm
閉脚時外寸 (幅)	718 mm
開脚時外寸 (幅)	1196 mm
閉脚時内寸 (幅)	578 mm
開脚時内寸 (幅)	1074 mm
床面から脚の頂部	115 mm 101 mm 57 mm
床面からシャーシ底部	25 mm 19 mm
機器全長	1118 mm
旋回径	1222 mm
保護等級	IPX4
コントロール手元スイッチの保護等級	IPX7
バッテリー	24 V, 4 Ah
バッテリー充電インジケータ	
サービスマーター - 合計使用時間 (時間単位) を表示	
緊急停止及びシステム故障時のオーバーライド	
自動安全停止機能 (下降時の障害物接触で作動)	
低摩擦キャスター (後方2輪ブレーキ付)	

アクセサリ

- さまざまなサイズのスプレッダーバー
- さまざまなスリングとFlites (使い捨てスリング)
- ストレッチャーソリューション
- オプション: 延長ジブ、体重計、低床キャスター
- Arjo製洗剤

スペース要件

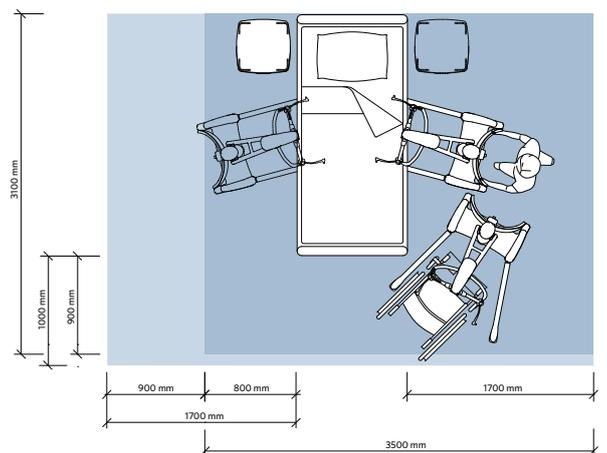

- 青色のエリアは、ベッドの片側から移乗支援機器を人間工学的に使用できる必要最低限の作業領域を示します。
- 水色のエリアは、ベッドの両側から患者様、移乗支援機器、介助者が容易にアクセスするために必要な拡張作業エリアを示します。

2019.11 Arjo 製品には、Arjo が専用に設計した部品のみを使用してください。当社のポリシーの一つは継続的改善を掲げているため、当社では事前の通知なしに設計・デザインを変更することがあります。® と ™ は、Arjo グループの企業に属する商標です。

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
アルジョ・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディック第2虎ノ門ビル9階 TEL: 03-6435-6401

Arjo.A00154(1).1.0.JP.JA PB-44.2107(C1)300cwp